

REVYLINE


Duo

RL 075

SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Limpet shell
Lime cream

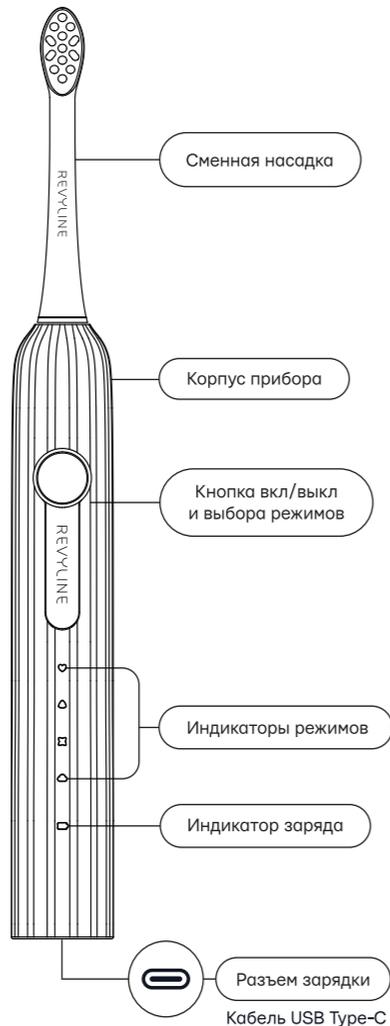

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая зубная щетка Модель: RL 075

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 4 режима работы – Gentle, Gum care, Clean, Polish
- Частота колебаний щетинок – 31 200–37 500 в мин.
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Питание – литиево-ионный аккумулятор (2000 mAh)
- Потребляемая мощность – 3 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Время полной зарядки – 7 ч.
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Более подробная информация о мерах предосторожности, предупреждениях медицинского характера, зарядке аккумулятора, процессе чистки, уходе за зубной щеткой, гарантийных случаях – на сайте.


www.revyline.ru

СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ

ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

Ирригаторы

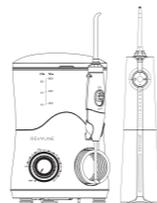

Ирригатор генерирует пульсирующую водную струю под давлением, которая вымывает зубной налет и микрочастицы пищи из самых труднодоступных мест ротовой полости, включая зубодесневую борозду и межзубные промежутки. При этом происходит гидромассаж десен.

Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки важно обращать внимание на следующее: у вашей щетки должна быть высокая плотность щетины (не менее 5000–6000 щетинок), кончики щетинок должны быть скругленными, а головка – компактной.

Монопучковые щетки



Монопучковая щетка используется для точечного очищения зубов, особенно дальних, межзубных промежутков, а также придесневой линии. Она незаменима при уходе за брекетами и другими ортодонтическими конструкциями.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное средство ухода за полостью рта. К ее выбору нужно подходить индивидуально, учитывая состав, предназначение, уровень абразивности и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает пространства между зубами. В ассортименте Revyline – плоские и круглые, вощеные и невоощеные нити.

Скребок для языка



Скребок удаляет бактериальный налет с поверхности языка, что предотвращает развитие целого ряда стоматологических заболеваний.

Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении межзубных промежутков и боковых поверхностей зубов, незаменим при уходе за несъемными ортодонтическими конструкциями, имплантатами и оголенными шейками зубов.

Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний. Используются как средства для ополаскивания полости рта и для приготовления растворов для процедур ирригации.

REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы развиваем наш бренд и делаем гигиену полости рта эффективной и осознанной, ведь главная наша цель – забота о красоте и здоровье людей.



Вместе с вами мы поддерживаем школы, сады, больницы, детские дома, благотворительные и учебные проекты и – главное – дарим улыбки тем, кому они необходимы!

Максим Обушенков,
врач-стоматолог,
руководитель компании Revyline
@freshmax13



Revyline – международная компания, основанная в 2013 году врачом-стоматологом. Товары бренда одобрены стоматологическими институтами.



Продукция Revyline имеет сертификат CE и РУ Минздрава на медизделия.



Revyline сотрудничает с тысячами докторов и клиник. Продукция создается при участии стоматологов и рекомендована экспертами.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном приборе на той площадке, где Вы приобрели его, пришлите ссылку на опубликованный отзыв в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите **200 руб.**
на Ваш телефон за отзыв!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:

+7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline

8 (800) 775-38-49 @ www.revyline.ru



Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

ИНСТРУКЦИЯ

Зарядка аккумулятора



Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем, находящийся в основании основного блока щетки.



Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.



Во время зарядки аккумулятора индикатор заряда медленно мигает. Когда батарея полностью заряжена, индикатор горит не мигая.



Если батарея почти разряжена, индикатор заряда быстро мигает, «напоминая» о необходимости подзарядки. Когда батарея полностью разрядится, индикация погаснет.



Щетка работает до 180 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки RL 075 2 стандартные сменные насадки.




Каждая насадка находится в герметичной тубе.



Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Установка и замена насадки

Снимите защитный колпачок и установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпала с лицевой стороной корпуса щетки.

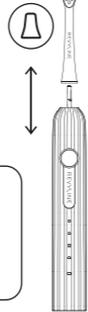

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.



Использование прибора



Нанесите небольшое количество пасты на щетину.



Поместите головку щетки в рот, чтобы избежать разбрызгивания пасты во время начала работы.



Один раз нажмите на кнопку управления для включения щетки.



Для выключения щетки также один раз нажмите на кнопку управления.

Выбор режима чистки



Выбор режима чистки осуществляется последовательным нажатием кнопки управления.



Щетка запоминает выбранный режим и включает его при последующем использовании.

Электрическая зубная щетка RL 075 позволяет использовать 4 режима работы:

GENTLE

Бережный режим чистки, подходит для чувствительных зубов. Можно использовать с 8 лет.

GUM CARE

Уход за деснами. Эффективная чистка зубов и гидромассаж десен.

CLEAN

Ежедневная чистка 2 раза в день.

POLISH

Полировка эмали. Возвращает зубам естественную белизну и придает им блеск.



2-минутный таймер каждые тридцать секунд делает небольшую паузу, напоминая о необходимости смены зоны чистки.



Процесс чистки




Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.



Наночите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

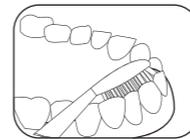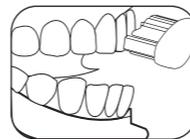

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив её параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

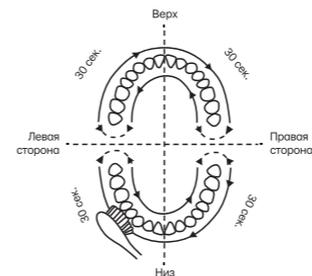

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре условных зоны и очищайте их поочередно. После 2 минут чистки щетка отключится автоматически.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

Предупреждения медицинского характера

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования щетки являются нормой. Если они сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили имплантаты или протезы, а также если у вас установлен кардиостимулятор или другие имплантированные устройства, перед началом использования щетки проконсультируйтесь с врачом.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °C до +20 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Основной блок щетки с защитным колпачком



2 сменные насадки в герметичных тубах



Кабель USB Type-C



Инструкция по эксплуатации



Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru

Импортер:
ИП Обушенков М.А.,
г. Элиста, ул. Джангара, д. 7

Производитель:
Ningbo Apiyoo Biotechnology
Co.,Ltd., No.39. Xurong road,
Ningbo, China/Китай

Сделано в Китае