

REVYLINE



RL 080 PRO

VIBROSONIC TOOTHBRUSH

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
С ДВОЙНЫМИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед первым применением электрической щетки RL 080 PRO внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики	4
Комплектация	4
Меры предосторожности	5
Предупреждения медицинского характера	6
Зарядка аккумулятора	6
Насадки в комплекте	7
Сенсорные функции	8
Включение/выключение прибора	8
Настройки режимов работы	9-10
Процесс чистки	11
Режим блокировки/разблокировки	12
Уход за зубной щеткой	12
Транспортировка, хранение и утилизация прибора	12
Гарантия	13

Если у вас остались вопросы,
обратитесь в сервисный центр:

 **8 (800) 775-38-49**

 **www.revyline.ru**

Электрическая зубная щетка с двойными колебательными движениями

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 6 режимов работы
- 125 вариантов настроек в режиме Customized
- Настраиваемый таймер
- Частота колебаний щетинок – 31 000 в мин.
- Угол (диапазон) колебаний щетинок – 0–20°
- Частота колебаний насадки – 90–330 в мин.
- Угол (диапазон) колебаний насадки – 0–60°
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Щетина – DuPont
- Влагозащита – IPX7
- Емкость аккумулятора – 2200 mAh
- Время полной зарядки аккумулятора – 16 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 30 дней
- Потребляемая мощность – 5 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Размер изделия – 30x29,6x242 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки
- 2 сменные насадки
- Дорожный футляр на магнитной застежке
- Зарядная база с кабелем USB Type-C
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте щетку во время принятия душа.
- Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
- Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
- Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
- Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Электрическую зубную щетку Revyline RL 080 PRO не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
- Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
- Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Зарядка аккумулятора осуществляется двумя способами: через кабель USB Type-C и с помощью зарядной базы.



Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.



В процессе зарядки на дисплее попеременно мигают четыре деления, отображая уровень заряда. Когда аккумулятор заряжен, все четыре деления горят зеленым.



С помощью длительного нажатия кнопки вкл/выкл можно проверить уровень заряда.



Щетка работает до 30 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации зубной щетки RL 080 PRO 2 сменные насадки.



Universal

Предназначена для очищения поверхностей зубов, придесневой линии, труднодоступных мест ротовой полости, удаления пигментированного налета.



Anti-sensitive


Предназначена для высокоэффективной чистки и полировки эмали.



Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

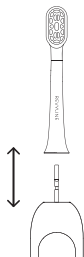

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Индикация установленного режима



RL 080 PRO сохраняет последний выбранный режим и воспроизводит его при включении. Чтобы понять, в каком режиме будет работать щетка, достаточно обхватить ладонью или двумя пальцами ее корпус в нижней части прибора. От прикосновения загорятся индикаторы, соответствующие ранее выбранному режиму.

Возврат насадки в стартовое положение

Насадка щетки вращается на 360° и оснащена функцией возврата в стартовое положение – когда рабочая поверхность насадки совпадает с лицевой стороной корпуса.



Если рабочая поверхность насадки не совпадает с лицевой стороной корпуса, вернуть насадку в стартовое положение можно с помощью нажатия кнопки вкл/выкл или обхватив щетку ладонью или двумя пальцами в нижней части корпуса. От прикосновения или включения насадка самостоятельно развернется на нужное количество градусов.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Чтобы включить или выключить прибор, нажмите на кнопку вкл/выкл.



Автоматическое отключение щетки через 2 минуты ее работы предусмотрено во всех режимах, кроме Customized. В настраиваемом режиме таймер можно устанавливать в диапазоне от 1 до 3 минут.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



Выбор режима работы осуществляется последовательным нажатием кнопки управления.

У Revyline RL 080 PRO 6 режимов работы.



Casual

Комфортная бережная чистка.



Caring

Подходит для людей с чувствительными зубами и начинающих пользователей.



Clean

Ежедневная стандартная чистка.



Clean+

Эффективная чистка для более тщательного удаления зубного налета.



Clean++

Интенсивная чистка с эффектом отбеливания и полировки.



Customized

Режим с самостоятельными настройками (125 вариантов чистки).

Настройки интерфейса в режиме Customized



Чтобы перейти в интерфейс, в режиме ожидания (когда загорелась иконка Revyline) нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку вкл/выкл.



После того как загорелись иконки таймера, уровня интенсивности, диапазона колебательных движений, скорости, сброса и возврата, можно переходить к настройкам.



Переход от иконки к иконке осуществляется с помощью кнопки управления, выбор нужного варианта – с помощью кнопки вкл/выкл.



Если в течение 8 секунд в настройках не будет активности, щетка автоматически вернется в выбранный режим работы.

Интерфейс



Таймер 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00


|||||..... Уровни интенсивности

↻..... Диапазон колебательных движений

↷..... Скорость

⚡ Сброс настроек


➡ Возврат

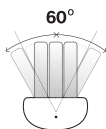

В каждом режиме работы различные: диапазон колебательных движений щетины, угол движения насадки и скорость (частота колебаний).

Режимы работы	Угол (диапазон) колебаний щетинок в градусах	Угол (диапазон) колебаний насадки в градусах	Частота колебаний насадки в минуту
Casual	7	6	90
Caring	8	18	150
Clean	9	30	210
Clean+	10	42	270
Clean++	11	60	330
Customized	7-11	6-60	90-330


ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

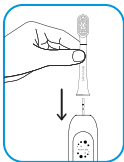



Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.



Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

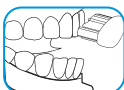

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, по необходимости совершая возвратно-вращательные движения.

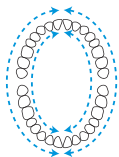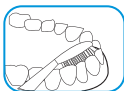

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре условных зоны и очищайте их поочередно, уделяя каждой одинаковое количество времени.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

После отключения щетки происходит оценка чистки – на дисплее высвечиваются грустный или веселые смайлики.



РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ



Осуществляется длительным нажатием кнопки управления – на дисплее отображается или исчезает значок замочка.

УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 080 PRO.
- Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °C до +20 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

REVYLINE

главный секрет вашей улыбки